

Beáta

Technický manuál

Přístup • instalace • Wi-Fi • bezpečnost



Jednoduchý postup je nejlepší technická podpora.

Verze 2026-09-14

Přístup do systému


Přihlášení a základní orientace

Otevřete v Google Chrome

Použijte přímý odkaz do přehledu, který jste obdrželi od Zrcadla péče.

Po přihlášení se otevře Přehled domova - týdenní srovnání.

Pokud máte uložené dřívější nastavení výchozí stránky, už je nepoužívejte (platí pouze pro uživatele starších verzí Grafany).

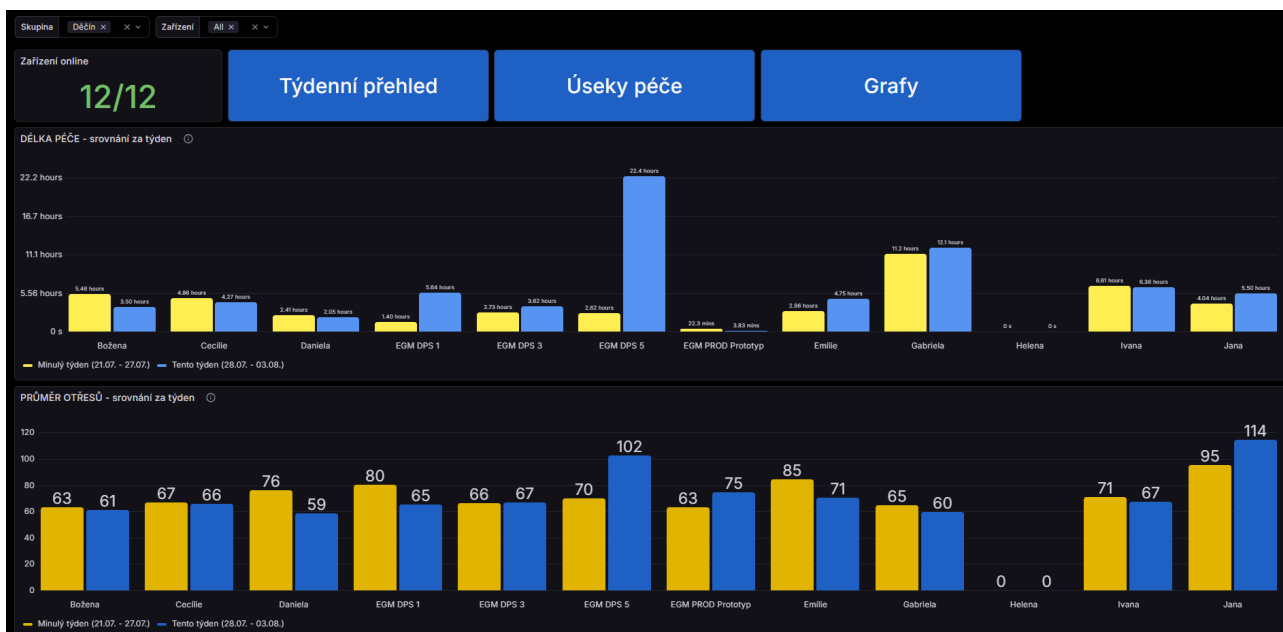

Na horní liště vždy nejprve zkontrolujte:

- Skupina – např. Děčín
- Zařízení – jedno zařízení nebo All
- Zařízení online – rychlá kontrola komunikace Beát



Orientace v přehledu

Přehled domova - týdenní srovnání

Po otevření Grafany jste automaticky na Přehledu domova - týdenním srovnání. Jedná se o srovnání jednotlivých Beát mezi dvěma týdny. V přehledu vidíte zejména délku péče a průměr otřesů.

Tři základní pohledy pro práci s daty

1

Týdenní přehled

Týdenní přehled délky péče Vámi vybraných Beát v rámci jednoho týdne.

2

Úseky péče

Pohled na konkrétní úseky péče v čase. Použijte jej, když vás v Týdenním přehledu zaujme konkrétní den nebo klient.

3

Grafy

Podrobnější pohled na naměřená data. Slouží k hledání souvislostí a detailnějšímu rozboru konkrétní situace.

Doporučený postup

1. Začněte v Přehledu domova - týdenním srovnání.
2. Pro detail jednoho týdne otevřete Týdenní přehled.
3. Když vás něco zaujme, přejděte do Úseků péče.
4. Pro detail použijte Grafy.

Instalace Beáty

První připojení pomocí telefonu Android

Obsah balení

Zařízení Beáta • propojovací USB kabel • USB zdroj 5 V

1 Zapojení

Propojte USB zdroj a pravý USB port Beáty. Zapojte zdroj do zásuvky a vyčkejte 30 sekund.

2 QR kód



Namiřte fotoaparát telefonu na QR kód na štítku zařízení.

3 Wi-Fi Beáty

Telefon nabídne síť se sériovým číslem Beáty, např. BA-001. Připojte se k ní.



4 Bez internetu

Vyčkejte na zprávu „Připojeno bez internetu“. To je v pořádku.

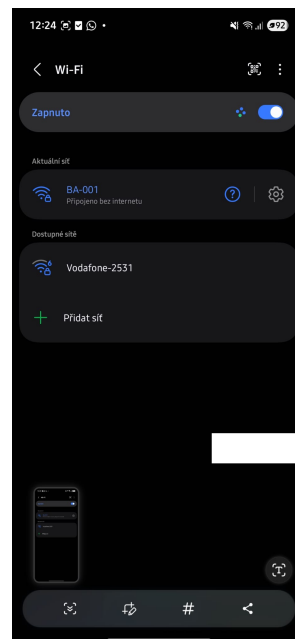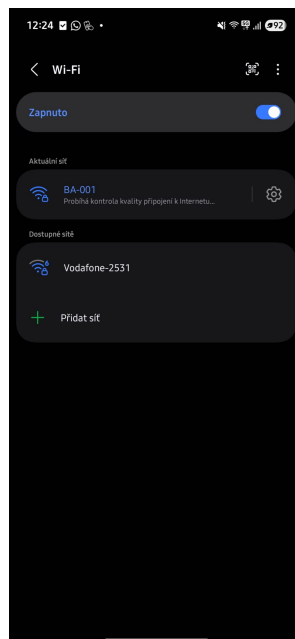

Otevření nastavení Beáty

Když se tlačítko „Správa směrovače“ zobrazí – i když se nezobrazí

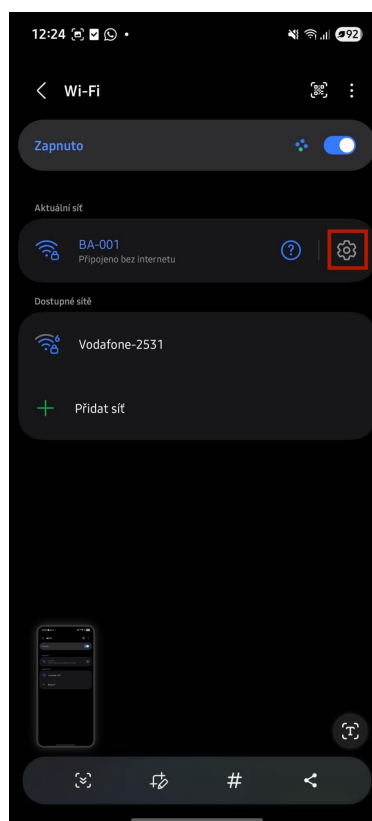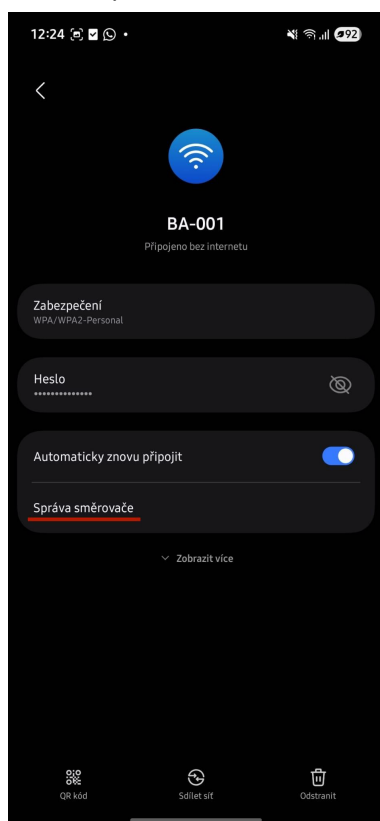

Když se „Správa směrovače“ nezobrazí

Otevřete Chrome a zadejte <http://beata.local>. Pokud se stránka neotevře, použijte <http://192.168.4.1>. Při chybě ERR_NETWORK_CHANGED vypněte Wi-Fi+ a mobilní data a zůstaňte připojeni k Wi-Fi Beáty i bez internetu.

Důležité: Nastavení IP ponechte na „Dynamická“. Statickou IP není potřeba nastavovat.

Pokud se stránka stále neotevře, použijte jiný telefon Android nebo notebook připojený k Wi-Fi Beáty.

Připojení k Wi-Fi domova

Vyberte síť, zadejte heslo a připojte Beátu

6. Vyberte síť

V nabídce „Vyberte síť“ zvolte Wi-Fi, ke které chcete Beátu připojit.

7. Zadejte heslo

Zadejte heslo k vybrané síti a stiskněte „Připojit“. Při správném zadání se zobrazí zpráva „Připojeno. Nyní můžete stránku zavřít“.

8. Umístěte Beátu

Zařízení připevněte pomocí speciálních suchých zipů ke konstrukci lůžka. Kabel vedte tak, aby se nemohl vytrhnout ani zachytit při polohování lůžka. Beátu umístěte co nejbližší středu lůžka a mimo pohyblivé části.



BEATA

Nastavení Wi-Fi připojení

Vyberte síť

Zadejte heslo

Připojit

Verze 1.2

Změna Wi-Fi a reset

Dva krátké postupy pro běžný provoz

Změna Wi-Fi sítě

1. Vyjměte zařízení ze zásuvky, vyčkejte 5 sekund a zapojte zpět.
2. Narovnanou kancelářskou sponku vložte do otvoru vedle diody a krátce stiskněte skryté tlačítko.
3. Vyčkejte 20 sekund.
4. Dále postupujte stejně jako při prvním připojení.

Resetování zařízení

Pokud zařízení neodpovídá, neodesílá data nebo se dostalo do chybového stavu, vyjměte zdroj na 5 sekund ze zásuvky a zasuňte jej zpět.



Bezpečnostní pravidlo

Poškozené zařízení se znovu nezapojuje

Pokud dojde k mechanickému poškození Beáty:

- Zařízení už znovu nezapojujte do elektrické sítě.
- Nesnažte se zařízení opravovat ani znovu zprovozňovat.
- Beátu odpojte, uložte mimo dosah klientů a kontaktujte technickou podporu DelpSys.
- Zařízení bude řešeno výměnou nebo odbornou kontrolou.

Toto opatření je preventivní. Zařízení má ochranné prvky a pracuje s malým napětím, přesto je po jakémkoli nestandardním chování nutné postupovat tímto způsobem.

Poznámka k použití manuálu

Tento dokument je určen pouze pro interní potřebu domova. Prosíme o jeho další nešíření mimo tým. Děkujeme, že s ním pracujete citlivě a s respektem.

Žádný systém, žádná data ani žádný dokument nenahradí lidskou pozornost, klid a přítomnost, kterou přinášíte ke každému lůžku. Tento materiál je jen nástrojem. Smysl péče tvoříte vy.